

El CR más confiable para Radiología en General y Mamografía.

Imágenes de diagnóstico de alta calidad. Diseño compacto que ahorra espacio.



Nano 7: REGIUS 110HQ y CS-7 SW

La consola CS-7 de procesamiento de imágenes, permite a sus usuarios utilizar REGIUS® Model 110HQ a su necesidad para una completa satisfacción:


- Diseño de pantalla con manejo fácil e intuitivo.
- Las funciones de procesamiento de imágenes proporcionan imágenes óptimas por cada parte del cuerpo
- Personalización automatizada de la densidad y el contraste de la imagen
- Alto rendimiento para la eficiencia del departamento

El REGIUS® MODEL 110 HQ compacto y que ahorra espacio, ofrece una función de lectura de alta resolución para mamografía.

43,75 µm de capacidad de lectura para mamografías.

Las imágenes de mamografía tienen gran valor con nuestra alta resolución de función de lectura de 43,75 µm, mientras que mantenemos la capacidad de lectura de 175 y 87,5 µm para radiología en general.

Los casetes de mamografía se pueden manipular de la misma manera que los casetes estándar anteriores, proporcionando la misma operatividad.

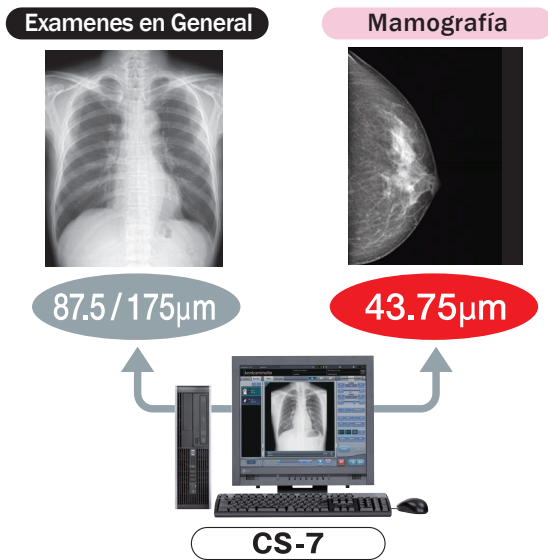

Manejo cómodo y sencillo

El REGIUS Modelo 110HQ permite una fácil operación con la simple instalación de un casete de exposición. La altura de la ranura del casete es de 710 mm, lo que permite una fácil inserción del casete.


Capacidad de procesamiento de aprox. 80 platos / hora para una mayor eficiencia del departamento.



© 2020 Konica Minolta Healthcare Americas, Inc. R110HQ is not available in the USA.

Diseño compacto con un ancho de tan solo 365 mm

El REGIUS Modelo 110HQ presenta un diseño sorprendentemente compacto con una superficie de solo 0.27m². El método de configuración bidireccional permite la selección de dos patrones de diseño según la necesidad y las limitaciones de espacio.

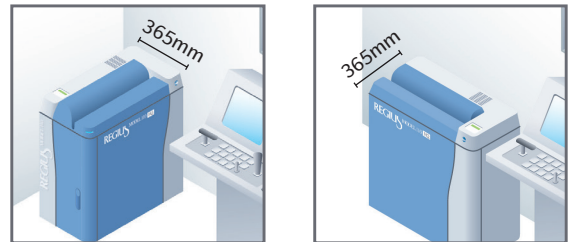

Casetes y placas para una variedad de usos:

- Uso de Radiografía en General
- Radioterapia
- C-plates con tecnología de cristal para un rendimiento DR en un CR
- Mamografía
- Stitching de cuerpo entero



Valor, confianza y funcionamiento sin preocupaciones

El alto índice de satisfacción del cliente de Konica Minolta se basa en brindarle asistencia durante todo el ciclo de vida de su sistema, no solo cuando se rompe. La gama más amplia de beneficios de Blue Moon ofrece valor económico y confianza clínica.



BLUE MOON



KONICA MINOLTA

Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark Pompton Turnpike
Wayne, New Jersey 07470
Tel: 1(973) 633-1500
healthcare.konicaminolta.us
km.marketing@konicaminolta.com

M1621 0420 RevA